

Kings Cutlery Assessment Kit in Case AA5548

Description

This attractive and comprehensive range allows over 400 individual cutlery items to be made from 32 modular items. It caters for virtually all needs, economically and elegantly.

Fitting and Adjustment

1. **Basic Fitting - Utensil to handle** (See fig 1).
To assemble a cutlery utensil to any of the handles simply push the handle firmly on to the cutlery utensil until it becomes flush with the handle. Rotate the handle to the desired position by twisting gently.
2. **Use of the adaptor** (See fig 2).
If the angled adaptor is required, push the adaptor on to the cutlery utensil and then push the adaptor into the chosen handle. Rotate the handle to the desired position by twisting gently.
3. **Use of Double Ended Handles** (See fig 3).
A. If using a handle with two utensils, place them into the handle, following the basic fitting instructions. If only one utensil is used then the spigot provided may be placed in the other end to close off the opening.
B. If the strap is required with a single or double piece of cutlery, push the main cutlery item through the single hole end of the strap and place the other cutlery piece or spigot provided through the appropriate hole in the strap. Note the strap will stretch but must not be too tight. (See fig 4).
4. **Use of Vari-grip PVC Sleeves** (See fig 5).
To use the vari-grip built-up sleeves AA5545 etc, they must all be fitted over the AA5543 slim handle.

First attach the slim handle to the cutlery utensil as in the basic fitting instructions. Then slide the chosen sleeve over the open end of the handle and push it on until it is flush with the rim of the handle. Rotate the handle to the desired position by twisting gently.

5. Use of the Customised Handle Kit

One packet of FIMO is sufficient to make one handle. Work a small piece (a 1 cm / 1/4" block) in your hand until pliable; gradually add the rest of the block until it is all pliable. If you find this difficult, the FIMO can be placed on a radiator for 1 to 2 minutes to soften.

Form the shape required for the individual's hand and push the pinched end of the metal inner core into the FIMO leaving the rim of the open end protruding slightly.

Take care not to get any material in the open end and check that the moulded shape has not been distorted.

Harden in a standard oven at a maximum temperature of 130°C / 265°F for 20 to 30 minutes. Note: do not fit the cutlery utensil until it has been hardened and is cool.

To Disassemble

If you wish to change cutlery utensils or handles simply twist the handle gently and pull out.

Cleaning and Care

Most items in the range can be washed in the usual manner or in a dishwasher. The lightweight handles, however, should not be washed in a dishwasher.

Fig. 1

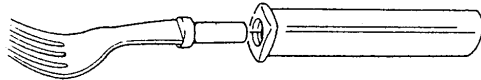


Fig. 2

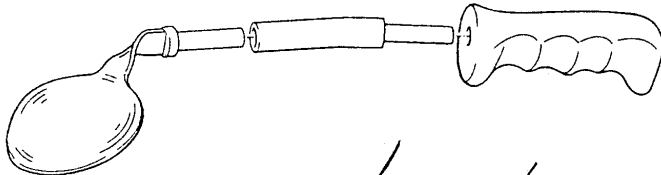


Fig. 3

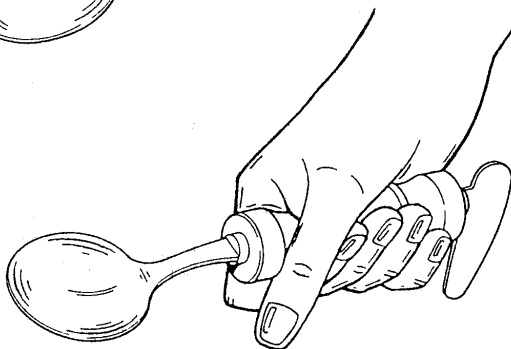


Fig. 4

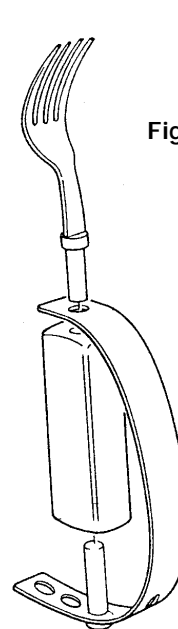


Fig. 5



Homecraft AbilityOne

Homecraft AbilityOne

Shelley Close, Lowmoor Business Park,
Kirkby-in-Ashfield,
Nottinghamshire, NG17 7ET, UK
Telephone: +44 (0)1623 754047 Facsimile: +44 (0)1623 755585

Sammons Preston Roylan

4 Sammons Court,
Bolingbrook,
IL 60440-4989, USA
Telephone: 1-630-226-0000 Telefax: 1-630-226-1390



Top Layer

- 1 AA5518 Kings Soft Coated Spoon
- 2 AA5519 Kings Soft Coated Teaspoon
- 3 AA5532L Kings Angled Spoon - Left handed
- 4 AA5532R Kings Angled Spoon - Right handed
- 5 AA5522 Kings Standard Spoon
- 6 AA5524 Kings Standard Teaspoon
- 7 AA5523 Kings Junior Spoon
- 8,9 AA5526 Kings Sipping Spoon (2)
- 10 AA5533 Kings Large Rocker Knife
- 11 AA5529 Kings Small Rocker Knife
- 12 AA5530 Kings Angled Knife
- 13 AA5528 Kings Nelson Knife
- 14 AA5520 Kings Standard Knife
- 15 AA5521 Kings Standard Fork
- 16 AA5531L Kings Angled Fork - Left handed
- 17 AA5531R Kings Angled Fork - Right handed
- 18 AA5527 Kings Splayed

Bottom Layer

- 1 AA5544 Kings Mushroom Handle
- 2 AA5542 Kings Customised Handle (Metal inner core and modelling material)
- 3 AA5547 Kings Vari-Grip Sleeve - Large
- 4 AA5546 Kings Vari-Grip Sleeve - Small
- 5 AA5545 Kings Vari-Grip Sleeve - Oval
- 6 AA5538 Kings Lightweight Foam Handle - Small
- 7 AA5537 Kings Lightweight Foam Handle - Large
- 8 AA5541 Kings Lightweight Double Ended Handle with Straps
- 9 AA5534 Kings Angled Adapter
- 10 AA5535 Kings Contoured Handle
- 11 AA5536 Kings Standard Handle
- 12 AA5539 Kings Heavyweight Handle
- 13 AA5543 Kings Slim Handle
- 14 AA5540 Kings Standard Double Ended Handle with Strap



Kings Bestik Evalueringssæt i Kuffert AA5548

Beskrivelse

Dette detaljerede udvalg der består af 32 moduler, kan fremstille over 400 stykker forskelligt bestik. Tilbehørssettet imødekommer stort set alle behov, økonomisk og nemt.

Samling og Tilpasning

1. Basissamling - håndtag (fig. 1). Håndtaget skubbes ned over bestikdelen. Bestikket drejes, indtil det sidder i ønsket position.
2. Brug af adaptor (fig. 2). Hvis der skal bruges en vinklet adaptor, sættes denne på bestikket, som derefter stikkes i det valgte håndtag. Drej håndtaget rundt, til det sidder i ønsket position.
3. Brug af dobbelt-ende håndtag (fig. 3).
 - Skal et håndtag bruges med 2 stykker bestik, placeres disse i håndtaget, som beskrevet under basissamling ovenfor. Skal der kun bruges eet stykke bestik, kan den inkluderede muffesamling placeres i den anden ende for at lukke åbningen i håndtaget til.
 - Hvis der skal bruges strop til et enkelt eller dobbelt stykke bestik, sættes et stykke bestik i strop-enden med det ene hul, og det andet stykke bestik (eller muffesamlingen) sættes i den anden ende af stroppen. Stroppen skal være udstrakt men ikke for stram (fig. 4).
4. Brug af Vari-håndtag PVC-manchet (se fig. 5). Bruges manchetten AA5545 etc., skal de bruges over de spinkle håndtag AA5543, som

sættes på som beskrevet under basissamling ovenfor. Den valgte manchete trækkes over den åbne ende af håndtaget og skubbes helt på. Drej håndtaget forsigtigt rundt, indtil det sidder i ønsket position.

5. Brug af tilpassede håndtag. En pakke FIMO er nok til at lave eet håndtag. Modeller et lille stykke (ca. 1 cm) i hånden, indtil det kan formes. Tilsæt gradvist resten af FIMO, indtil det hele kan formes. Føles dette svært, kan FIMO placeres på en radiator, hvor det varmes i 1-2 minutter, indtil det er blødgjort. Form det, så det passer patientens hånd. Skub den sammenklemte ende af metal-inderdelen ind i FIMO, så det lader kanten på den åbne ende stå en anelse frem. Vær opmærksom på, at materialet ikke kommer ind i den åbne ende og check, at formen ikke er blevet ændret. Det formede håndtag hærdes i en ovn ved en maksimum temperatur på 130°C i 20-30 minutter. Bemærk: Sæt ikke håndtaget på bestikket, før det er afkølet.

Afmontering

Skal der udskiftes bestik eller håndtag, tages håndtaget af ved at blive drejet forsigtigt rundt og trukket ud.

Vedligeholdelse

De fleste dele kan vaskes enten i hånden eller i opvaskemaskinen. "Lightweight Foam" håndtagene kan dog ikke vaskes i opvaskemaskinen.


Øverste lag i Tasken

- 1) AA5518 Kings ske med blød overflade.
- 2) AA5519 Kings teske med blød overflade.
- 3) AA5532L Kings vinklet ske - venstrehåndet.
- 4) AA5532R Kings vinklet ske - højrehåndet.
- 5) AA5522 Kings standard ske.
- 6) AA5524 Kings standard teske.
- 7) AA5523 Kings junior ske.
- 8,9) AA5526 Kings søbeske (2).
- 10) AA5533 Kings rokker kniv - large.
- 11) AA5529 Kings rokker kniv - small.
- 12) AA5530 Kings vinklet kniv.
- 13) AA5528 Kings Nelson kniv.
- 14) AA5520 Kings standard kniv.
- 15) AA5521 Kings standard gaffel.
- 16) AA5531L Kings vinklet gaffel - venstrehåndet.
- 17) AA5531R Kings vinklet gaffel - højrehåndet.
- 18) AA5527 Kings udadvendt.

Nederste lag i Tasken

- 1) AA5544 Kings champignon håndtag.
- 2) AA5542 Kings tilpassede håndtag (metal-inderdel og model leringsmateriale).
- 3) AA5547 Kings Vari-håndtag manchete - large.
- 4) AA5546 Kings Vari-håndtag manchete - small.
- 5) AA5545 Kings Vari-håndtag manchete - oval.
- 6) AA5538 Kings letvægts-skumhåndtag - small.
- 7) AA5537 Kings letvægts-skumhåndtag - large.
- 8) AA5541 Kings letvægts-dobbelt-ende håndtag med stropper.
- 9) AA5534 Kings vinklet adaptor.
- 10) AA5535 Kings kontur håndtag.
- 11) AA5536 Kings standard håndtag.
- 12) AA5539 Kings sværvægts-håndtag.
- 13) AA5543 Kings spinkle håndtag.
- 14) AA5540 Kings standard dobbelt-ende håndtag med stropper.

Top layer

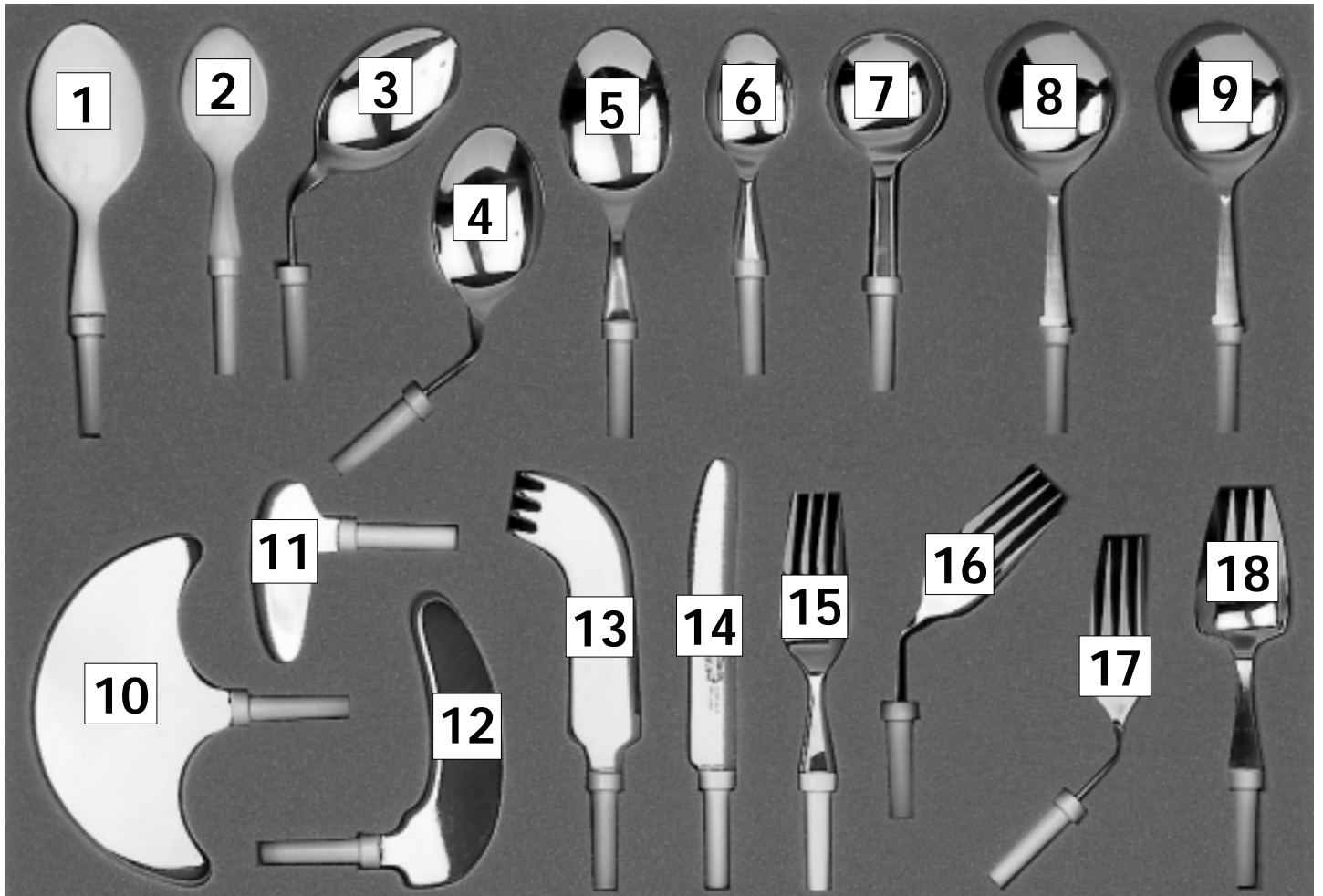

Bottom layer

