


Rolyan® Walker Splint:

A767-1 through 4



A

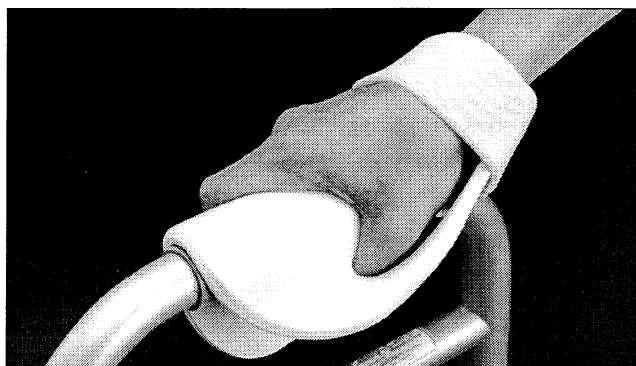

B

INDICATIONS

- To help people with a weak grip hold onto a walker handle

PRECAUTIONS

- This splint is to be fitted initially by a healthcare professional who is familiar with the purpose for which it is prescribed. The healthcare professional is responsible for providing wearing instructions and precautions to other healthcare practitioners, care providers involved in the patient's care, and the patient.
- If unusual swelling, skin discoloration or discomfort occurs, use should be discontinued and a healthcare professional consulted.
- Be careful that the strap is not so tight that it interferes with circulation.
- After heating splinting material, always check its temperature before applying it to the patient.

- For safety in case the patient falls while using the walker, the splint should not be permanently attached to the walker.

CARE AND CLEANING

- The splint will lose its shape in temperatures over 135°F (57°C). It should be kept away from sources of heat such as ovens, hot water, open flames, and sunny car windows.
- The splint can be cleaned with soap and lukewarm water. Avoid wetting the adhesive on the hook tabs and the optional Kushionflex® pad.
- The strap can be washed with soap and water.
- The splint and strap should be allowed to dry thoroughly before reuse.

PROCEDURE

The splint should be positioned over the handle of the walker so the thumb fits into the side opening (A).

- Attach the hook tabs to the underside of the splint where it curves away from the walker and attach the strap to one of them (B).
- Place the splint over the walker handle. The splint should be snug enough so it does not rotate on the walker handle, but it should be loose enough to be removed without excessive effort.
- If the splint requires adjusting, spot heat the Polyform® splint with a heat gun or in a heat pan of water at a temperature of 150° to 160°F (65°–70°C) until pliable. **Heating the entire splint may cause it to lose its preformed shape.**
- The Kushionflex pad can be placed where the heel of the hand rests on the splint. Trim it to fit as necessary before applying the self-adhesive back to the splint.
- A completed splint is shown in A.

NEDERLANDS

Rolyan® loophekspalk

INDICATIES

- Als hulpmiddel op een loophekehandgreep voor personen met een zwakke greep

VOORZORGSMAATREGELEN

- Deze spalk moet aanvankelijk worden gepast door een medische deskundige, die weet waarvoor deze spalken worden voorgeschreven. De medische deskundige moet de instructies voor het dragen van deze spalk en de voorzorgsmaatregelen bespreken met de andere medische deskundigen, degenen die betrokken zijn bij de verzorging van de patiënt en met de patiënt zelf.
- Indien ongewone zwelling, huidverkleuring of ongemak optreedt, dient het gebruik te worden gestaakt en moet contact worden opgenomen met een medische deskundige.
- Zorg ervoor dat de band niet zodanig strak wordt aangebracht dat de bloedsomloop wordt belemmerd.
- Wanneer de spalk wordt opgewarmd, dient u altijd de temperatuur te controleren alvorens de spalk bij de patiënt aan te brengen.

- Om veiligheidsredenen voor het geval dat de patiënt tijdens het gebruiken van het loophek valt, mag de spalk niet permanent aan het loophek bevestigd zijn.

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

- De spalk verliest zijn vorm bij temperaturen hoger dan 57° C. Houd de spalk uit de buurt van warmtebronnen zoals ovens, heet water, open vuur en aan zon blootgestelde ramen van uw auto.
- De spalk kan met lauw water en zeep worden schoongemaakt. De bandjes kunnen met water en zeep worden gewassen. Voorkom dat het kleefmiddel op de haaklipjes en het optionele Kushionflex® kussentje nat worden.
- De band kan met water en zeep worden gewassen.
- De spalk en de band moeten eerst grondig gedroogd worden voordat ze weer gebruikt kunnen worden.

PROCEDURE

De spalk moet zodanig over de handgreep van het loophek worden geplaatst dat de duim in de binnenopening past (A).

- Bevestig de haaklipjes aan de onderkant van de spalk waar die bij het loophek vandaan buigt en bevestig de band aan één ervan (B).
- Plaats de spalk over de handgreep van het loophek. De spalk moet strak genoeg zitten zodat die niet op de handgreep ronddraait, maar hij moet los genoeg zijn zodat hij zonder veel moeite verwijderd kan worden.
- Als de spalk aangepast moet worden, plaatselijk de Polyform® spalk met een hittepistool of in een pan heet water bij een temperatuur van 65° tot 70° C verwarmen totdat deze buigzaam wordt. **Het opwarmen van de hele spalk kan tot gevolg hebben dat de voorgevormde vorm verloren gaat.**
- Het Kushionflex kussentje kan worden geplaatst waar de hiel van de hand op de spalk rust. Knip dit zonnodig bij voordat u de zelfklevende achterkant op de spalk aanbrengt.
- In A wordt een klaargemaakte spalk afgebeeld.