



# GAUNTLET THUMB POST SPLINT

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN - INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### INSTRUCTIONS FOR USE - GEBRAUCHSANWEISUNGEN



Listed with  
**FDA CE**

Material: ORFIT® COLORS NS 2.0 mm micro perfo

**Indicaties:** MCP verstuiking (skiërsduim) - rhizartrorse - reuma - nervus medianus letsels

**Indications:** Mono arthrité MP - rhizarthrose - polyarthrite rhumatoïde - entorse du pouce - atteinte du nerf médian

**Indications:** Acute MCP arthritis - basal joint osteo arthritis - rheumatoid arthritis - thumb sprain - median nerve palsy

**Indikationen:** Akute MCP-Arthritis - Rhizarthrose - rheumatoide Arthritis - Medianus-Lähmung

Dit product is vervaardigd uit een lage temperatuur thermoplastisch materiaal dat direct op de patiënt kan worden gevormd.  
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzingen (ref. nr. 31052) van het hierboven aangeduide basisproduct en neem de voorzorgsmaatregelen in acht die daarbij horen.

Dit spalkpatroon is NIET GESCHIKT voor volgende toepassingen:

- fractures van het os naviculare (scaphoideus)
- acute de Quervain tendinitis

Deze gebruiksaanwijzingen werden opgesteld in de geest van de Europese Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het is verboden veranderingen aan te brengen in deze tekst zonder voorafgaande toestemming van ORFIT Industries.  
Indien u bijkomende exemplaren wenst, neem dan contact op met de verdeler in uw land of stuur een faxbericht naar (+32) (0)3 326 14 15 of een e-mailbericht naar [welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com).

This product is made of a Low Temperature Thermoplastic material and can be moulded directly on the patient.  
Before starting, read the instructions for use (ref. No. 31052) of the basic product mentioned above and take all the necessary precautionary measures.

This pattern is NOT SUITABLE for the following applications:

- fractures of the scaphoide
- acute de Quervain tendinitis

These instructions were made up in accordance with the European Directive 93/42/EEC for Medical Devices. It is prohibited to make alterations to this text without prior approval from ORFIT Industries.  
For additional copies, please contact your local distributor or send a fax to (+32) (0)3 326 14 15 or an e-mail to [welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com).

Ce produit est fabriqué dans un matériel thermoformable à basse température, qui est formé directement sur le patient.  
Lisez d'abord attentivement les instructions d'utilisation (ref. no. 31052) pour le produit de base mentionné ci-dessus et respectez les précautions d'usage y référant.

Ce patron n'est PAS INDIQUE pour les cas suivants:

- fractures du scaphoïde
- tendinite aiguë de de Quervain

Ces instructions d'utilisation ont été rédigées dans l'esprit de la Directive Européenne 93/42/CEE concernant les aides techniques médicales. Il est interdit d'apporter des modifications à ce texte sauf accord préalable d'ORFIT Industries.  
Si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, prenez contact avec notre distributeur dans votre pays ou envoyez votre demande par fax (+32) (0)3.326.14.15 ou par e-mail à [welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com).







Dieses Produkt ist aus ein Niedrigtemperatur Thermoplast hergestellt und darf unmittelbar auf den Patienten angelegt werden.  
Lesen Sie zuerst andächtig die Gebrauchsanweisungen (Ref. Nr. 31052) die zu dem o.e. Basisprodukt gehören und nehmen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen.

Dieses Dessin EIGNET SICH NICHT für die nachstehenden Indikationen:

- Frakture des Scaphoideus
- akute de Quervain Sehnenentzündung

Diese Gebrauchsanweisungen wurden im Geiste der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG für medische Hilfemittel aufgestellt. Es ist verboten den Text zu ändern, ohne vorhergehende Zustimmung von ORFIT Industries.  
Falls Sie mehrere Exemplare wünschen, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem Verteiler in Ihrem Land, oder schicken Sie uns einen Faxbericht nach der Nummer (+32) (0)3 326 14 15 oder einen e-mail Bericht nach der Adresse [welcome@orfit.com](mailto:welcome@orfit.com).

Ref.: 35810-35811-35812 ORFIT COLORS NS – version 1 – last update: 18/10/2013 – revision date: 18/10/2015

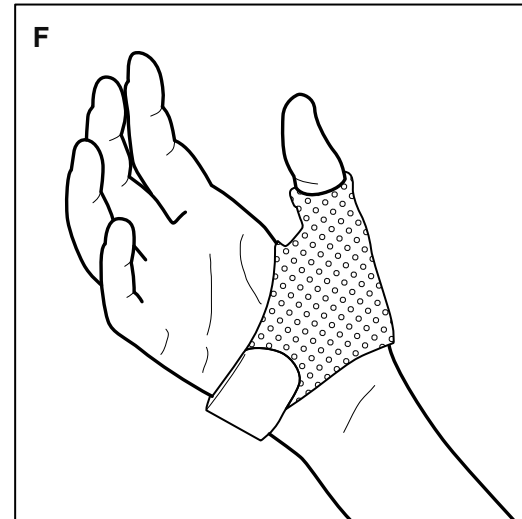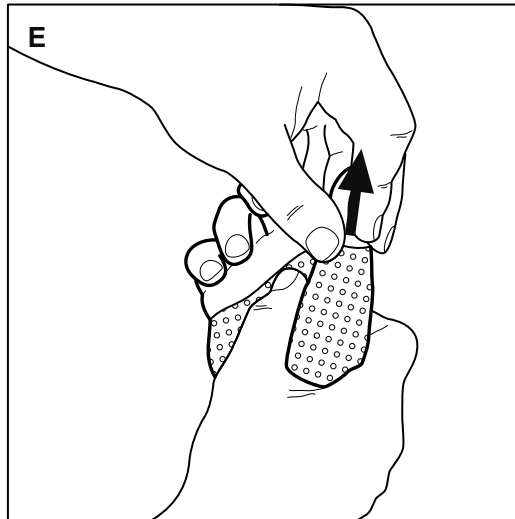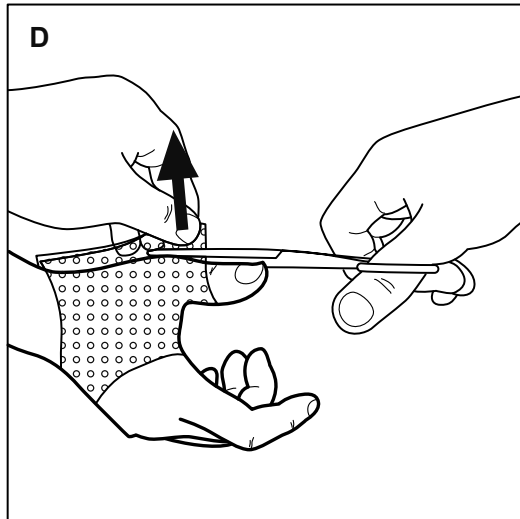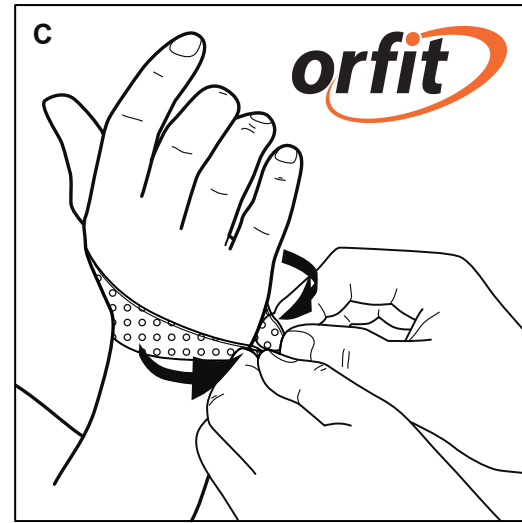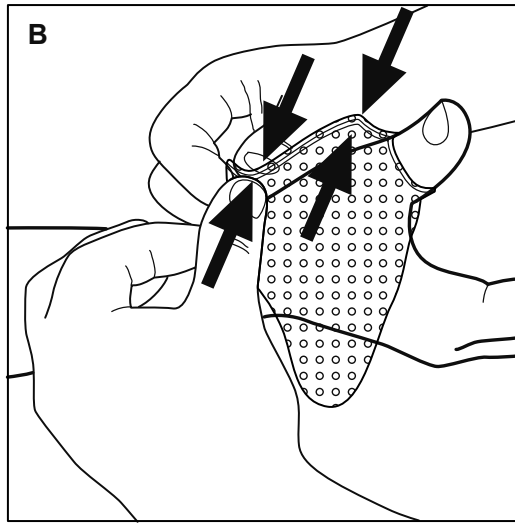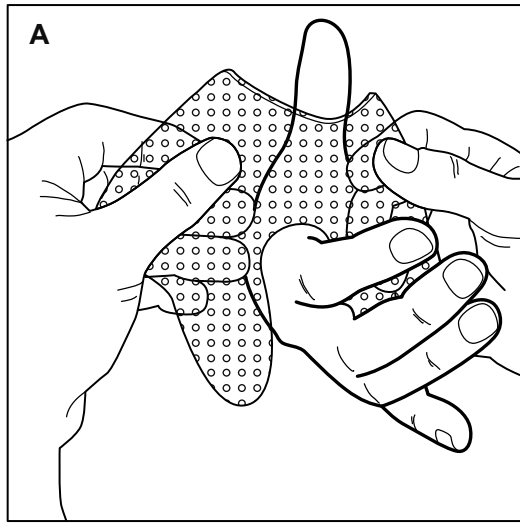

**ORFIT® COLORS NS - 2.0 mm - micro perforated**

**precuts**

Description	Size	Art. No.			
		Ocean Blue	Atomic Blue	Sonic Silver	Dominant Black
Gauntlet Thumb Post Splint	S	35810B/NS	35810MB/NS	35810MG/NS	35810Z/NS
	M	35811B/NS	35811MB/NS	35811MG/NS	35811Z/NS
	L	35812B/NS	35812MB/NS	35812MG/NS	35812Z/NS